

The top comfort solution

MASTER4 65ZA

Hi-tech ophthalmic equipment



65ZA MASTER4

RIUNITO MASTER4

Il riunito Master4 nasce nella pluriennale esperienza acquisita nella progettazione e nello sviluppo degli automatismi applicati ai riuniti oftalmici. Troviamo in questo riunito per 4 strumenti per tavole traslanti, il sollevamento, la rotazione e la traslazione dei piani delle tavole tutto completamente motorizzato.

E' inoltre possibile applicare un braccio verticale di sostegno per forottero con movimento elettrico ed un braccio rotante con la cassetta porta lenti di prova che ruota manualmente nella posizione di lavoro.

MASTER4 UNIT

The unit Master4 come from many years of experiences acquired in the project engineering and development of the automation applied of the ophthalmic units. In this unit for four instruments placed on traversing tables, the raising, the rotation and the opening of the tops is totally motorized. Furthermore it's possible to apply a motorized vertical counterbalanced arm for the refractor and manual rotating arm with a trial lenses drawer



Supporto centrale versione standard
Central support standard version



Supporto centrale speciale con mensole per farmaci e possibilità di applicazione monitor sulla sommità
Central support special version with shelves for pharmaceuticals and the possibility to apply a video on the top



Cossettiera lenti di prova
Trial lenses drawer



BRACCIO VERTICALE
Braccio verticale motorizzato art. 63DA accessorio con lampada spot orientabile

VERTICAL ARM
Motorized vertical arm art. 63DA equipped with adjustable spot lamp

TAVOLE ROTANTI
Quattro tavole rotanti con posizionamento automatico

ROTATING TABLES
Four rotating tables with automatic positioning

MASTER4

PANNELLO DI CONTROLLO CONTROL PANEL



Accensione
Power



Proiettore
Projector



Presse ausiliaria
Auxiliary outlet



Presse ausiliaria
Auxiliary outlet



Lampada alogena
Halogen lamp



Luce ambiente
Room light



Movimento tavole
Tables movement



Spostamento poltrona avanti/indietro
Forward/backward chair movement



Salita e discesa e reset poltrona
Chair Raising, lowering and reset



Salita e discesa e chiusura tavole
Tables raising, lowering and closing



Apertura/chiusura baccio forottero
Refractor arm opening/closing



Lampada spot
Spot light



Stop di emergenza
Emergency stop



Master 4

65ZA

MASTER4 65ZA

Riunito completo di strumentazione

MASTER4 65ZA

Unit complete with instruments



DATI TECNICI

Tensione di ingresso:	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potenza:	1110 VA
Lampoda ologena:	150 W
Altezza tavole:	min 800 mm max 950 mm
Peso:	230 Kg
Larghezza:	~1870 mm
Profondità:	1430 mm
Altezza:	1900 mm

TECHNICAL DATA

Input tension:	220 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz
Power:	1110 VA
Halogen lamp:	150 W
Tables height:	min 800 mm max 950 mm
Weight:	230 Kg
Width:	~1870 mm
Depth:	1430 mm
Height:	1900 mm

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



Soluzione destra e sinistra
Right and left solution



Con sollevamento elettrico della tavola strumenti
With motorized elevation instruments table




Poltrone disponibili: tutti i modelli di poltrona
Available chairs: all models of chairs



Opzionali disponibili:
Available options:

Braccio verticale art. 63DA, supporto braccio art. 63CZ, cassetto lenti di prova rotante art. 65ZA-C1, carrier centrale in legno art. 65ZACCB03, caricatore strumenti art. ZA65-PCR
Vertical arm art. 63DA, arm support art. 63CZ, trial lenses rotating drawer art. 65ZA-C1, wood central support art. 65ZACCB03, rechargeable wells art. ZA65-PCR

DIMENSIONI / DIMENSIONS

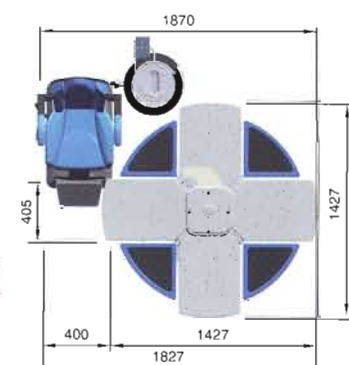



MASTER4

HI-TECH OPHTHALMIC EQUIPMENT

TECNOLOGIA E
COMFORT

65ZA

COMFORT AND TECHNOLOGY

Adatto per tutti quei professionisti che utilizzando un gran numero di strumenti necessitano il massimo comfort e la massima efficienza. Le solide caratteristiche costruttive, la disponibilità di tutti i modelli di poltrone della nostra produzione e l'ampia serie di accessori a corredo, fanno del riunito Master4 quanto di meglio sia possibile richiedere per completezza e qualità.


Suitable for all those professionals who need to perform their sight visit as fully, with the largest number of instruments for the various requirements in the most efficient modalities. The sturdy construction features, availability of all models of chairs of our production and the wide range of accessories supplied, make the Master4 unit the best that is possible to ask for completeness and quality.

Master 4

 **FRASTEMA**
ophthalmic equipments

OPHTHALMIC EQUIPMENTS

BY FRATEMA

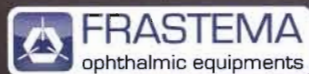

FRATEMA SRL, born in the ophthalmic field becoming one of the main manufacturers of ophthalmic units, chairs and electrical tables. The introduction of new technologies allowed us a remarkable increasing of the productive capacity with a big improvement of quality in the final product.

The obtaining of the certification UNI EN ISO 9001:2008 is the result of the efforts for a best customer service.

FRATEMA SRL nasce nel settore dell'oftalmologia e si afferma nel campo della costruzione di riuniti, poltrone e tavoli ad uso oftalmico. L'introduzione delle più moderne tecnologie ha permesso negli ultimi anni un'incremento notevole della capacità produttiva, con un miglioramento sostanziale anche sotto il profilo della qualità del prodotto finale. L'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 è il risultato finale degli sforzi sostenuti per dare al cliente sempre un miglior servizio.

<http://www.frastema.com>
e-mail: info@frastema.com



POLYVISUS®